

Thermo Phrase
サーモフレーズ


NISSEI

正しく測定するために


測定結果は、環境の変化によって影響が出ます。

人の移動

寒い場所から暖かい場所に移動した場合

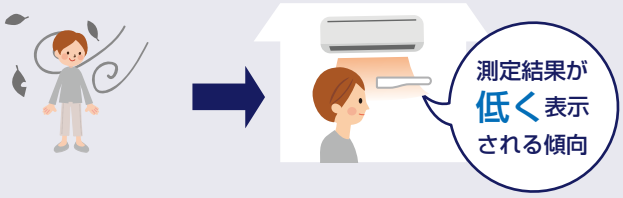


暖かい場所から寒い場所に移動した場合

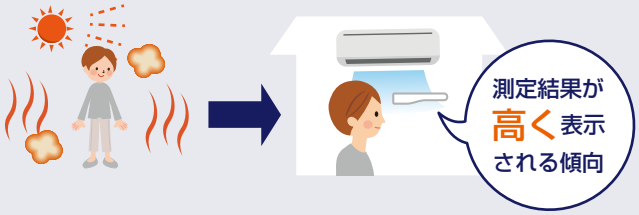


体温計の移動

寒い場所から暖かい場所に移動した場合

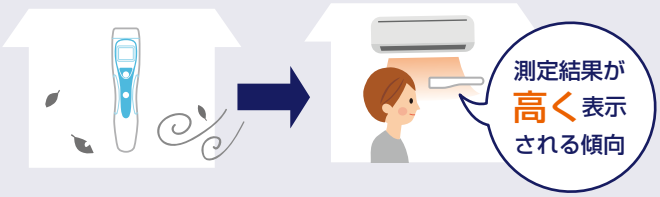

暖かい場所から寒い場所に移動した場合

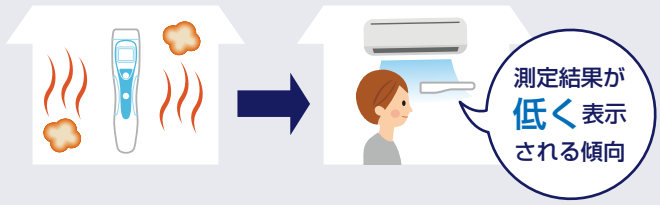

機器を測定する室温※で 30 分程度なじませてから測定してください。


額の表面温度が測定場所※の温度になじむまで、測定場所でしばらく休憩をしてから測定してください。

※測定は、室温が 10℃～ 40℃の環境でおこなってください。

以下の場合でも、正しく測定できない場合があります。

額に風があたっている

エアコンや扇風機などの風が額にあたっていると、額の表面温度が下がり、正しい体温を表示することができません。

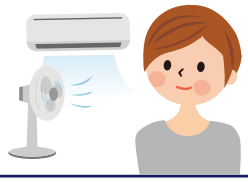


額が汗などで濡れている

汗などで額が濡れていると表面温度が下がり、正しい体温を表示することができません。



直射日光が額に当たっている

直射日光が額にあたっていると、額の表面温度が上がり、正しい体温を表示することができません。

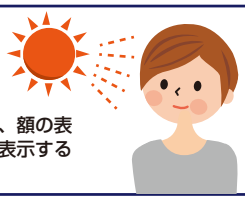

測定の妨げになるものがある

髪の毛やファンデーションなど、測定の妨げになるものが額とセンサーの間にあると正しく測定されない場合があります。




額の近くに手を添えている

額の近くに手などの他の部位があると、測定センサが額以外の温度を測定してしまう場合があります。



額と本体の距離が近すぎる

体温計を額に垂直に向けて、4cm 以上離れた距離からゆっくりと近づけてください。

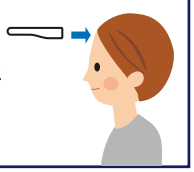

冷却シート等を額に貼って解熱対応されている患者様には、サーモフレーズの使用は控えてください。

NISSEI

腋下体温計・非接触体温計とは？


腋下体温計



腋下電子体温計は、先端のセンサーで温度を感知します。ワキをしっかりと閉じることで体の内部の温度が反映されます。

非接触体温計




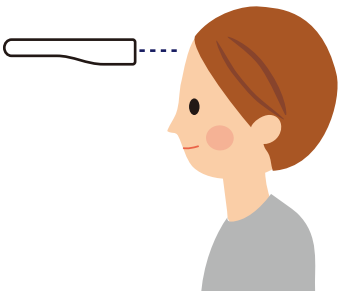



額表面の**赤外線量**を計測し、
腋下温度に換算して体温を表示します。

非接触体温計の体温の測り方

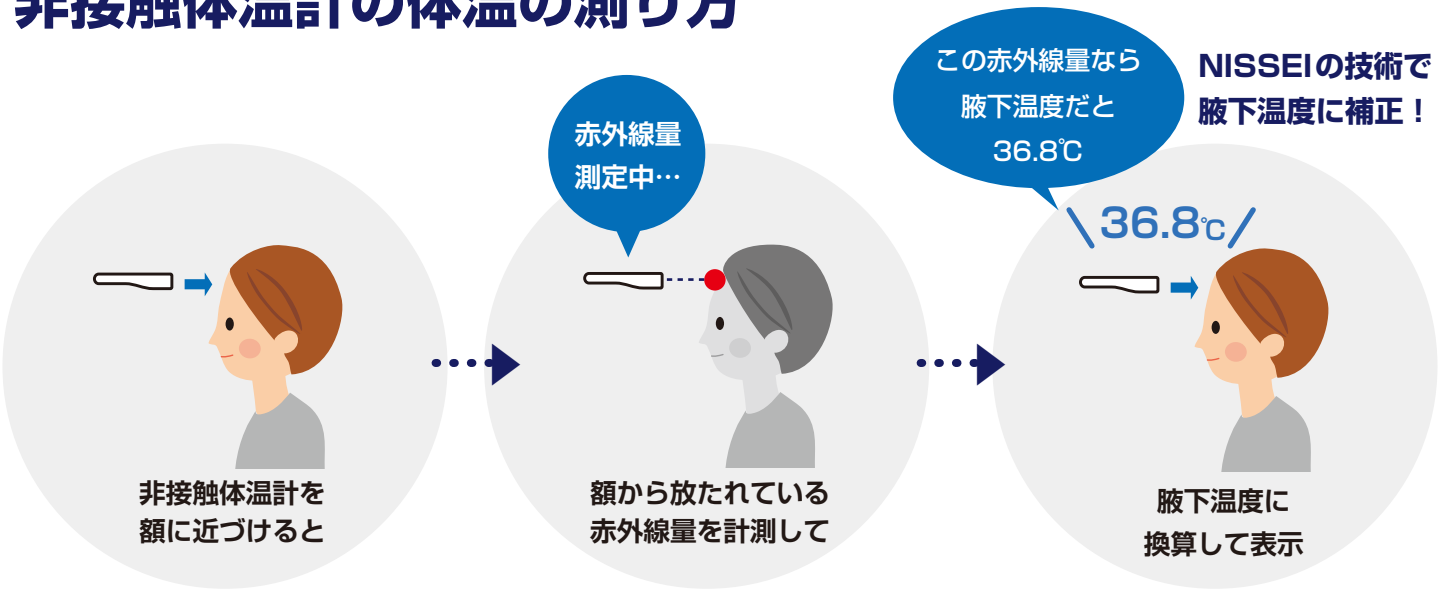

腋下体温計・非接触体温計の特徴

体温計種類	感染症対策	測定時間	測定精度
非接触体温計	皮膚に触れない	最短 約1秒	環境の変化によって影響を受ける
腋下体温計	皮膚に触れる	約30秒（実測は約10分）	実測測定ができる（約10分）